



## Przyrząd do usuwania zaskórników Instrukcja obsługi



Szanowni Użytkownicy,  
inFace Blackhead Remover jest przyrządem do usuwania zaskórników, które zostało zaprojektowane i wyprodukowane przez Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., firmę powiązaną z Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.. Od momentu powstania jest dla nas najważniejsze, by produkty były praktyczne, funkcjonalne i bezpieczne. Chcemy tworzyć innowacyjne inteligentne urządzenia bazujące na najnowszych technologiach.

### **inFace Blackhead Remover**

Zasysający przyrząd kosmetyczny do usuwania zaskórników.

#### **Cechy produktu**

- Usuwanie zaskórników
- Usuwanie sebum
- Usuwanie trądziku
- Głębokie czyszczenie

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**


Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.  
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.

- Urządzenie należy ładować za pomocą oryginalnego kabla znajdującego się w zestawie, podłączając go do domowego gniazdka elektrycznego.
- Nie należy używać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, należy zaprzestać używania, aby uniknąć wypadków.
- Produkt nie powinien być stosowany w pobliżu gałek ocznych, powiek, małżowin usznych, szyi, gdyż może spowodować uszkodzenie.
- Nie używaj produktu do skóry po zabiegach kosmetycznych, operacjach plastycznych, operacjach nosa, a także na zranionej czy pokrytej bliznami skórze.
- Przed użyciem produktu należy dokładnie osuszyć ręce, by zapobiec przedostaniu się wody do urządzenia, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.
- Jeśli odczuwasz ból lub skóra jest nadwrażliwa, natychmiast zaprzestań używania produktu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji produkt należy wyłączyć.
- Dzieci nie mogą korzystać z produktu. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych (alkohol, benzyna, zmywacz do paznokci, spray itp.).
- Produkt nie jest wodoodporny, nie należy przechowywać go w łazience lub innych wilgotnych miejscach. Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani płukać bezpośrednio pod kranem.
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku upadku lub uderzenia, należy zaprzestać jego używania.
- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym w sprawach dotyczących konserwacji.

- Alergicy, osoby z chorobami skóry, stanami zapalnymi skóry, alergiami skórnymi, ciężkimi oparzeniami słonecznymi, uszkodzeniami skóry, egzemą, obrzękami nie powinny korzystać z produktu.

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

1. Kabel do ładowania DC x1
2. inFace Blackhead Remover x1
3. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna x1
4. Antypoślizgowa podstawka silikonowa x1
5. Zestaw dysz x 1
6. Zestaw gąbek x1
7. Silikonowa nakładka x1

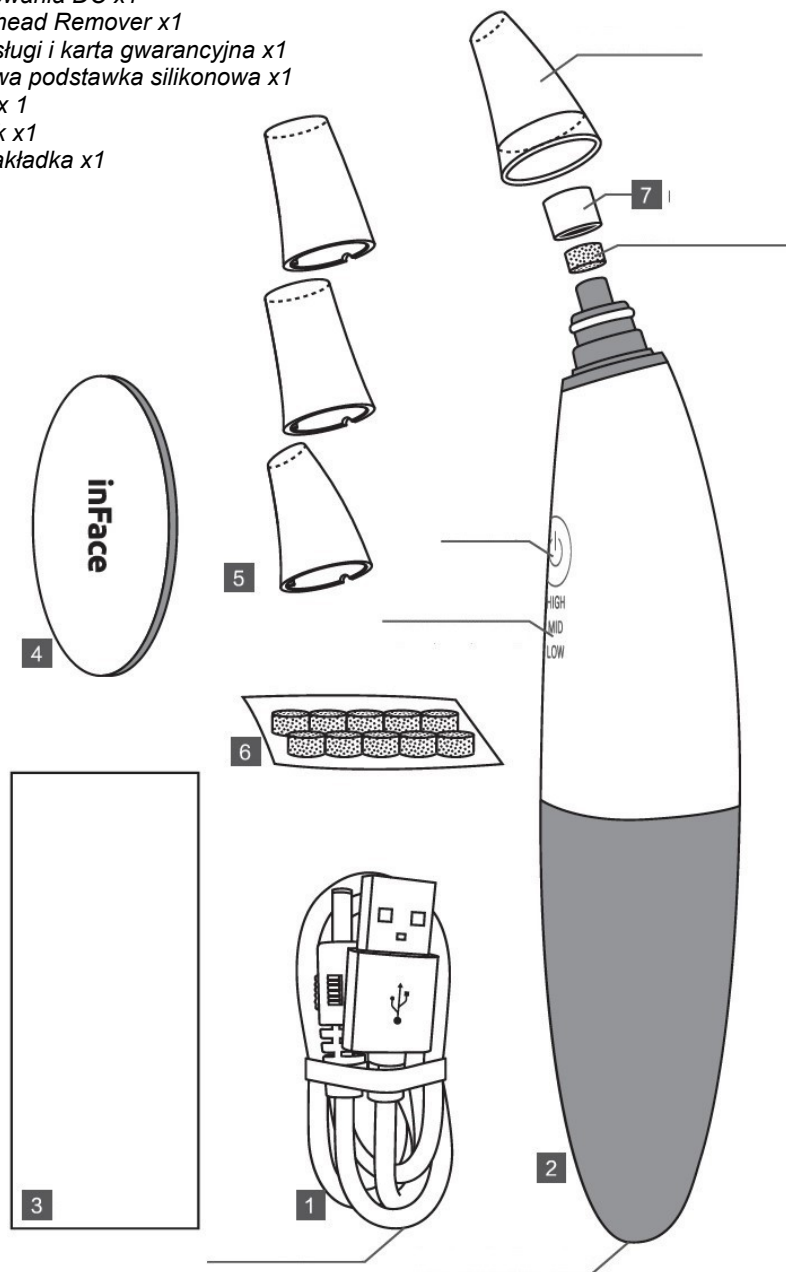

## **SPECYFIKACJA**

Nazwa produktu: inFace Blackhead Remover  
Model produktu: MS7000  
Rozmiar produktu: 183mm x 35 mm  
Waga netto: Około 135 mg  
Pojemność baterii: 400 mAh  
Prąd ładowania: 300 mA  
Napięcie ładowania: 5 V=

Czas ładowania: Około 2 godzin  
Prąd podczas czuwania: 40 uA  
Zakres temperatury pracy: 0°C ~ 40°C  
Materiały: PC  
Siła ssania: Maks. 62 kpa

## **Uwaga:**

Instrukcja i zawarte w niej informacje i rysunki mają charakter poglądowy.

Ze względu na nieustanne doskonalenie produktów firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

## **SPOSÓB DZIAŁANIA**

1. Przyrząd jest wyposażony w dwa tryby pracy.
  - Tryb 1 (dioda świeci na niebiesko) jest trybem ciągłym.
  - Tryb 2 (dioda świeci na pomarańczowo) jest trybem zasysającym z przerwami.
2. Aby włączyć urządzenie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.
3. Aby przełączać tryby należy długo nacisnąć przycisk, gdy urządzenie jest włączone.
4. Aby ustawić siłę ssania (LOW/MID/HIGH) należy krótko nacisnąć przycisk, gdy urządzenie jest włączone.
5. Aby wyłączyć urządzenie należy dwukrotnie nacisnąć przycisk.

## **SPOSÓB UŻYCIA**

Wskazówki przed użyciem:


Wybierz odpowiedni tryb do pielęgnacji swojej skóry.

Tryb 1 – tryb ciągłego ssania, niebieska dioda włączona: tryb cechuje się wysoką siłą ssania, która jest odpowiednia dla skóry z większymi porami, głęboko oczyszcza skórę.

Tryb 2 - tryb zasysający z przerwami, pomarańczowa dioda włączona: w tym trybie urządzenie zasysa z przerwami, dzięki temu zabiegi są delikatniejsze i mniej bolesne, zalecany dla skóry wrażliwej.


### **- Pierwszy krok – nawilżenie skóry**

1. Umyj twarz, a następnie nałóż na nią ciepły ręcznik przez 3-5 minut, aby pory się otworzyły.
2. Aby uzyskać lepsze efekty, zaleca się zwilżenie wacika tonikiem przeznaczonym do usuwania zaskórników, a następnie nałożenie go na nos i pozostawienie na 8-10 minut.

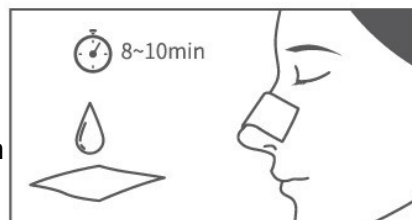


### **- Drugi krok – usuwanie zaskórników**

1. Wybierz tryb ciągłego ssania lub tryb ssania z przerwami w zależności od potrzeb, przetestuj siłę ssania na swojej dłoni i wybierz odpowiedni tryb.
2. Podczas oczyszczania skóry, nie trzymaj urządzenia w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy.
3. Po oczyszczeniu zaskórników wyczyść dyszę ssącą wilgotnymi chusteczkami lub wodą.

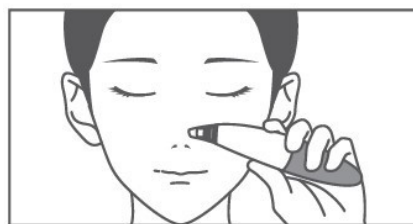

### **- Krok trzeci – obkurczanie porów**

1. Aby uzyskać lepsze wyniki, zaleca się zwilżenie wacika tonikiem obkurczającym pory, a następnie nałożenie go na nos i pozostawienie na 8-10 minut.
2. Pozostałości preparatu wklep w twarz aż zostanie wchłonięty.

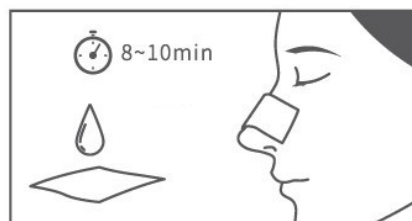

## Porady

- Przed użyciem toników należy zawsze wykonać test alergiczny na wewnętrznej stronie nadgarstka przez 5 min. Jeśli nie pojawią się zmiany, produkt można użyć na twarz. W przypadku alergii zrezygnuj z używania tonika, a do otworzenia porów użyj okładów z ręcznika ręcznika.
- Nie należy zbyt mocno naciskać dyszy i nie trzymać urządzenia w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy, gdyż może to spowodować podrażnienie skóry. Należy zastosować wtedy zimny okład, a gdy objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza.
- To normalne, że skóra może być zaczerwieniona po użyciu produktu.
- Nie używaj peelingów ani innych produktów złuszczących przed lub po pielęgnacji.
- Po zakończeniu pielęgnacji należy zastosować krem nawilżający z filtrem ochronnym UV.

## INSTRUKCJA ŁADOWANIA

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy w pełni naładować.
- Podczas ładowania niebieskie diody (LOW-MID-HIGH) będą migać na zmianę.
- Po pełnym naładowaniu, trzy niebieskie diody LED będą świecić się stale i zgasną po odłączeniu kabla.
- Podczas ładowania przycisk urządzenia nie będzie działał.
- Czas ładowania wynosi około 2 godzin, a naładowane do pełna urządzenie może pracować przez około 45 minut. Czas użytkowania będzie się różnił w zależności od warunków użytkowania.
- Jeśli ładowanie przebiega nieprawidłowo, należy natychmiast odciąć zasilanie.
- Używaj i przechowuj kabel do ładowania prawidłowo, nie zginaj, nie rozciągaj, nie skręcaj, itp.

## RODZAJE DYSZ

1. Dysza z dużym okrągłym otworem (duża moc ssania)

Dysza z dużym otworem ma silną siłę ssania i przeznaczona jest dla skóry z zaskórnikami, trądzikiem, a także do usuwania sebum i pozostałości kosmetyków. Osoby o delikatnej i cienkiej powinny używać tego trybu ostrożnie. Ten tryb zaleca się stosowanie raz w tygodniu przez trzy minuty lub w zależności od stanu skóry.

Nie należy go stosować wokół skóry oczu. Nadaje się idealnie do szorstkiej twarzy i skóry ze zmarszczkami.

2. Dysza z małym okrągłym otworem (mniejsza moc ssania)

Dysza z małym okrągłym otworem ma słabszą siłę ssania. Służy do usuwania zaskórników, trądziku, sebum i pozostałości kosmetyków u osób o delikatnej, wrażliwej i cienkiej skórze, a także skórze normalnej.

3. Dysza z owalnym otworem (normalna moc ssania)

Dysza z owalnym otworem może być używany do codziennej pielęgnacji skóry. Jest przeznaczona do policzków, nosa, ust i owalu twarzy. Gdy skóra zostanie zassana przez dyszę, szybko ją wyciągnij. Przy luźnej skórze unieś twarz do góry i naciągnij skórę.


4. Dysza do pryszczycy (dedykowana do skóry z pryszczami)

Kształt dyszy jest specjalnie zaprojektowany do skóry z pryszczami. Dysza zasysa pryszcz i dogłębnie go oczyszcza.


Po czyszczeniu skóry należy zdezynfekować i zastosować środek antyseptyczny, aby zapobiec rozwojowi bakterii.




## Wymiana dyszy ssącej:

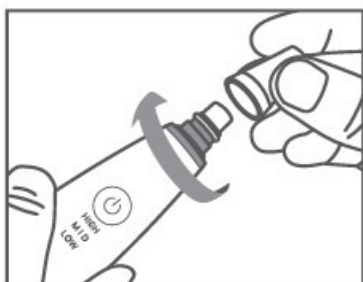

1. Przytrzymaj urządzenie i delikatnie wyciągnąć dyszę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

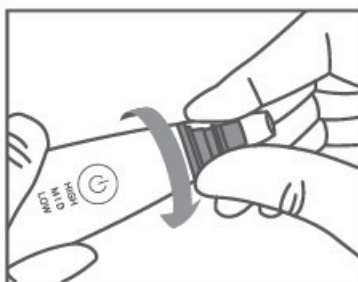


2. Przytrzymaj urządzenie i wymień dyszę ssącą, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

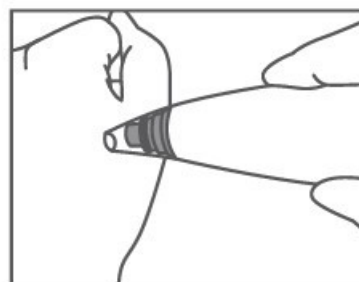


3. Po wymianie należy sprawdzić działanie ssania.


## Wymiana gąbki:

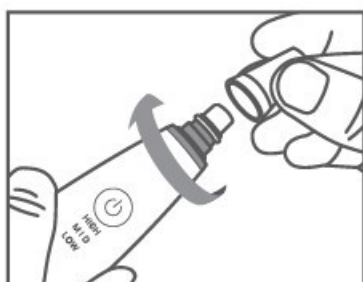

1. Przytrzymaj urządzenie i delikatnie wyciągnij dyszę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

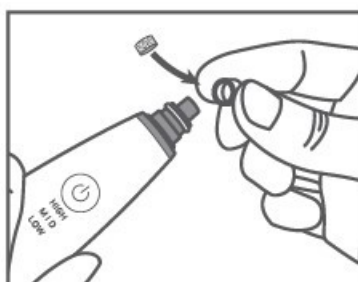

2. Zdejmij silikonową nakładkę, wyjąć gąbkę i zastąpić ją nową.

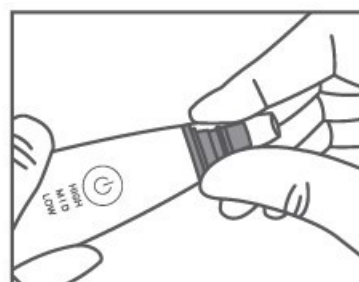

3. Nałóż nakładkę silikonową i dokręć dyszę.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie należy czyścić urządzenia ostrymi przedmiotami, środkami żrącymi, lotnymi, a także produktami zawierającymi silne kwasy i zasady.

Należy delikatnie wytrzeć urządzenie miękką i wilgotną ściereczką lub płatkami kosmetycznym.

Nie należy splukiwać urządzenia bezpośrednio wodą.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (około 3 miesiące), należy go w pełni naładować, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

## NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy, sprawdź poniższą tabelę. Jeśli nie możesz rozwiązać problemów, skontaktuj się z serwisem.

1) Co zrobić, gdy nie odpowiada Ci siła ssania?

A: Urządzenie posiada dwa tryby (tryb ciągłego ssania/tryb ssania z przerwami) oraz trzy różne poziomy mocy (LOW-MID-HIGH) Wybierz odpowiedni tryb i dostosuj moc do swoich potrzeb.

2) Co zrobić, gdy ładowanie się nie powiodło?

A: Jeśli urządzenie nie ładuje się, sprawdź:

1. Czy ładowanie przebiega normalnie.
2. Czy kabel ładujący i złącze są nieuszkodzone.
3. Czy świeci się dioda LED ładowania.

3) Co zrobić, gdy urządzenie nie włącza się po naładowaniu?

A: Włącz urządzenie, naciskając przycisk dwukrotnie. Jeśli nie ma żadnej odpowiedzi, sprawdź:

1. Czy ładowanie przebiega normalnie i czy dioda LED świeci się podczas ładowania.
2. Czy zasilanie jest odpowiednie.

4) Co zrobić, gdy urządzenie wyłącza się automatycznie po 3 minutach użytkowania?

A: Urządzenie posiada 3 - minutową funkcję inteligentnej ochrony. Jeśli nie używasz urządzenia przez 3 minuty, włączy się automatyczny tryb uśpienia, a urządzenie wyłączy się. Gdy chcesz korzystać z urządzenia, włącz je ponownie.

5) Co zrobić, gdy skóra jest zaczerwieniona?

O: Zaczerwienienie jest normalnym efektem ubocznym i skóra po pewnym czasie wróci do normy. Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób usuwasz zaskórniki: staraj się nie ciągnąć skóry i poruszać urządzeniem podczas zasysania. Nie zatrzymuj się w tym samym miejscu od 3 do 5 razy i nie dłużej niż na 2 sekundy. Po ukończonym zabiegu umyj twarz zimną wodą i nałóż maseczkę nawilżającą (5 – 10 minut) lub przemyj twarz tonikiem.

### **SERWIS POSPRZEDAŻOWY**

1. inFace zapewnia roczną gwarancję na swoje produkty zgodnie ze standardem usług "New Three Guarantees National Policy (China)". Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym świadczymy usługi wymiany części lub całego produktu z powodu wad materiałowych lub procesu produkcyjnego.
3. Aby ubiegać się o gwarancję, należy dostarczyć sprzedawcy produkt oraz fakturę potwierdzającą datę zakupu.
4. Serwis gwarancyjny nie obejmuje:
  - a. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą, np. użyciem niewłaściwego zasilacza, niewłaściwego gniazdka.
  - b. Procesu starzenia się i zużycia produktu wynikających z normalnego użytkowania.
  - c. Problemów spowodowanych użytkowaniem w innych celach, niewłaściwą obsługą, nieprofesjonalną naprawą lub użyciem akcesoriów innych firm.
  - d. Materiałów eksploatacyjnych.
  - e. Uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe i inne siły wyższe (grzmoty i błyskawice, trzęsienie ziemi, powodzie, itp.).

### **Ochrona środowiska**

1. Produkt, opakowania i akcesoria są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
2. Odpady należy segregować, aby ułatwić ich recykling.



### **Przetwarzanie odpadów**

Produkt nie może być wyrzucany z pozostałymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu dokonania recyklingu zgodnie z klasyfikacją odpadów.



## KARTA GWARANCYJNA

Numer produktu:

Data zakupu:

Nazwa klienta:

Adres klienta:

Numer telefonu:

Nazwa produktu:

Informacje o sprzedawcy:

Numer zamówienia:

Opis usterki:

(Wypełnij dane z karty gwarancyjnej przy zgłaszaniu się do serwisu naprawczego. Okres gwarancji na produkt wynosi jeden rok).

Informacje o firmie: Shenzhen Migoo Smart Co, Ltd.

Adres: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent

Manufacturing Industrial Park, Gushu Community,

Xixiang Sub-District, Bao'an District,

Shenzhen, Chiny

E-mail: [service@migoosmart.com](mailto:service@migoosmart.com)

Kod pocztowy: 518000

\*Prawo do ostatecznej interpretacji należy do Shenzhen Migoo Smart Co., Ltd.

(15:18)



WetChat  
Official Account



Service WetChat