



Ramenní Tlakoměr Extralink Smart Life K-4S, Bílý



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/tonometry/ramenni-tlakomer-extralink-smart-life-k-4s-bily>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPJRMMLP



Full product description

Simultánní měření systolického krevního tlaku, diastolického krevního tlaku a pulsu

Přístroj umožňuje současné a přesné měření tří klíčových zdravotních parametrů:

The device can simultaneously and accurately measure three key health parameters:



Systolic blood pressure



Diastolic blood pressure



Pulse



Paměť měření

Přístroj je vybaven pamětí, která umožňuje uložit a uložit posledních 99 výsledků měření systolického krevního tlaku, diastolického krevního tlaku a pulsu. Schopnost přesně sledovat změny zdravotních parametrů v průběhu času může být užitečná zejména při sledování postupu léčby nebo při pravidelných zdravotních kontrolách. Tato funkce vám také umožňuje snadno sdílet vaše výsledky s profesionálními poskytovateli zdravotní péče během lékařských návštěv.

The internal memory of the blood pressure monitor can be used to store results. With dual storage, each measurement result can be stored twice – once as the current result and once as the last result before it. This will store the last 240 measurements in the device's memory.




Jednoduché ovládání jedním tlačítkem

Intuitivní ovládání jedním tlačítkem usnadňuje používání zařízení i pro osoby, které neznají lékařskou techniku. Funkce úspory energie automatickým vypnutím napájení po třech minutách nečinnosti, což podporuje dlouhodobé používání zařízení.

How to use:

1. Wrap the cuff around the patient's left arm.
2. Making sure that the fingers fit between the cuff and the arm to ensure a proper fit, but not too tightly.
3. The cuff should be applied evenly and smoothly, with the bottom edge of the cuff approximately 2 fingers above the bend of the elbow.
4. Raise your left arm with the cuff upwards, holding the monitor at the same height as your heart. This position will help ensure a more accurate blood pressure measurement.
5. Once you have adjusted the cuff and the patient's arm, press the Start-Stop button on the blood pressure monitor to start the measurement.
6. After reading the result, turn off the blood pressure monitor and remove the cuff from the patient's arm.

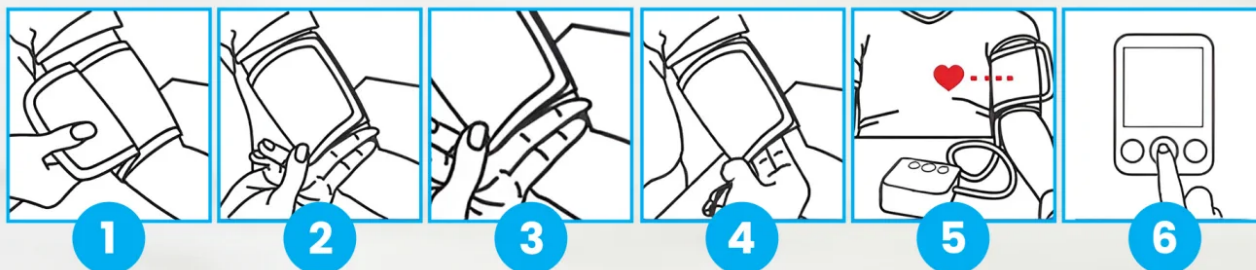

Kompaktní provedení

Kompaktní design a nízká hmotnost usnadňují přenášení zařízení, což vám umožní sledovat vaše zdraví kdekoli



Ideal for home use

The compact design and light weight make the device easy to carry, allowing you to monitor your health anywhere



Upper arm blood pressure monitor

Simultaneous measurement of systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse



Accurate measurement



Storage of the last 240 results




LED display



One-button operation



Automatic power switch-off

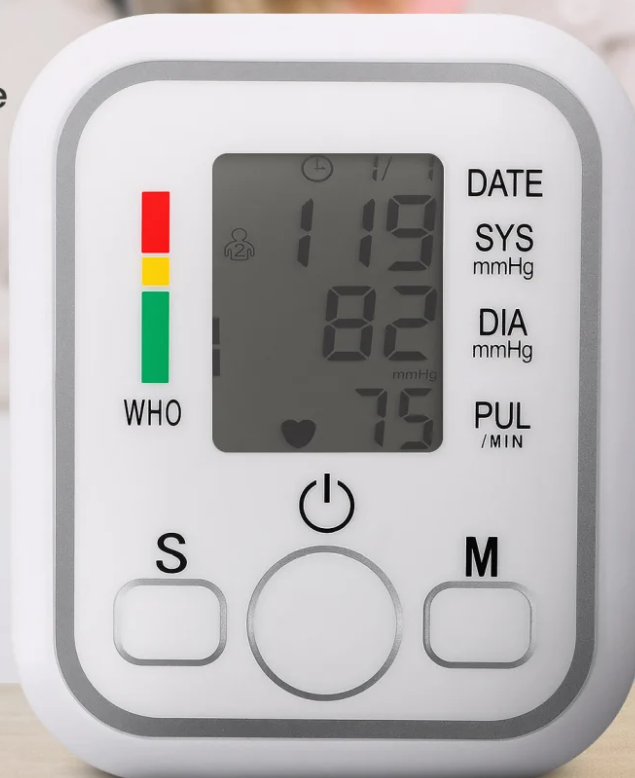

Simple one-button operation



Intuitive one-button operation makes the device easy to use, even for those unfamiliar with medical technology.



An energy-saving function that automatically switches off the power after three minutes of inactivity, promoting long-term use of the device.



1 hour before measurement

