



Extralink Smart Life K-4S Oberarm Blutdruckmessgerät, Weiß



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/blutdruckmessgerate/extralink-smart-life-k-4s-oberarm-blutdruckmessgerat-weiss>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPJRMMLP

Full product description

Gleichzeitige Messung von systolischem Blutdruck, diastolischem Blutdruck und Puls

Das Gerät ermöglicht die gleichzeitige und genaue Messung von drei wichtigen Gesundheitsparametern:

Das Gerät kann gleichzeitig und genau drei wichtige Gesundheitsparameter messen:



Systolischer Blutdruck



Diastolischer Blutdruck



Puls



Messwertspeicher

Das Gerät ist mit einem Speicher ausgestattet, in dem **die letzten 99 Ergebnisse der** systolischen Blutdruck-, diastolischen Blutdruck- und **Pulsmessungen aufgezeichnet und gespeichert** werden. Die Fähigkeit, **Veränderungen** der Gesundheitsparameter im Laufe der Zeit **genau zu verfolgen**, kann besonders nützlich sein, um den **Fortschritt der Behandlung** oder regelmäßige Gesundheitskontrollen zu **überwachen**. Mit dieser Funktion können die Ergebnisse bei Arztbesuchen auch problemlos an professionelle Gesundheitsdienstleister weitergegeben werden.

Der interne Speicher des Blutdruckmessgeräts kann zum Speichern von Ergebnissen verwendet werden. Mit der Doppelspeicherung kann jedes Messergebnis zweimal gespeichert werden – einmal als aktuelles Ergebnis und einmal als das letzte Ergebnis davor. Dadurch werden die letzten 240 Messungen im Speicher des Geräts gespeichert.




Einfache Ein-Knopf-Bedienung

Intuitive Ein-Knopf-Bedienung macht das Gerät auch für Personen, die mit Medizintechnik nicht vertraut sind, einfach zu bedienen.

Energiesparfunktion durch automatische Abschaltung des Geräts nach drei Minuten Inaktivität, was die langfristige Nutzung des Geräts fördert.

Wie man sie anlegt:

1. Legen Sie die Manschette um den linken Arm des Patienten.
2. Achten Sie darauf, dass die Finger zwischen Manschette und Arm passen, um einen guten, aber nicht zu engen Sitz zu gewährleisten.
3. Die Manschette sollte gleichmäßig und glatt angelegt werden, wobei die Unterkante der Manschette etwa 2 Finger über der Ellenbeuge liegen sollte.
4. Heben Sie den linken Arm mit der Manschette nach oben und halten Sie den Monitor auf gleicher Höhe wie Ihr Herz. Diese Position trägt dazu bei, eine genauere Blutdruckmessung zu gewährleisten.
5. Nachdem Sie die Manschette und den Arm des Patienten eingestellt haben, drücken Sie die Start-Stopp-Taste am Blutdruckmessgerät, um die Messung zu starten.
6. Nachdem Sie das Ergebnis abgelesen haben, schalten Sie das Blutdruckmessgerät aus und nehmen die Manschette vom Arm des Patienten ab.

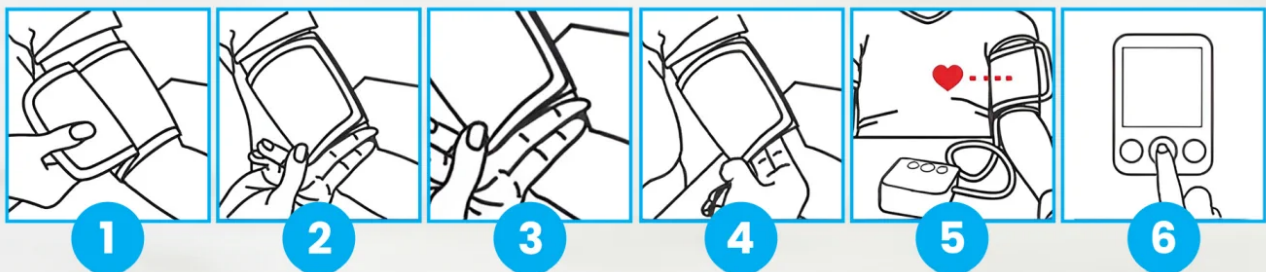

Kompakte Bauweise

Durch das **kompakte Design** und das geringe Gewicht ist das Gerät **leicht zu tragen** und ermöglicht die Gesundheitsüberwachung an jedem Ort



The image shows a person's arm with a black blood pressure cuff. They are holding a small, white, rectangular digital blood pressure monitor. The monitor has a small LCD screen displaying '128' and '88'. It also has several buttons and labels: 'M', 'S', 'PUL', 'DIA', 'SYS', 'DATE', and 'BPM'. A black cable connects the cuff to the monitor.

Ideal für den Heimgebrauch

Dank des kompakten Designs und des geringen Gewichts lässt sich das Gerät leicht transportieren, so dass Sie Ihre Gesundheit überall überwachen können



Oberarm- Blutdruckmessgerät

Gleichzeitige Messung
von systolischem Blutdruck,
diastolischem Blutdruck und Puls



Genaue Messung



Speicherung der letzten
240 Ergebnisse




LED-Anzeige



Ein-Knopf-Bedienung



Automatische
Stromabschaltung

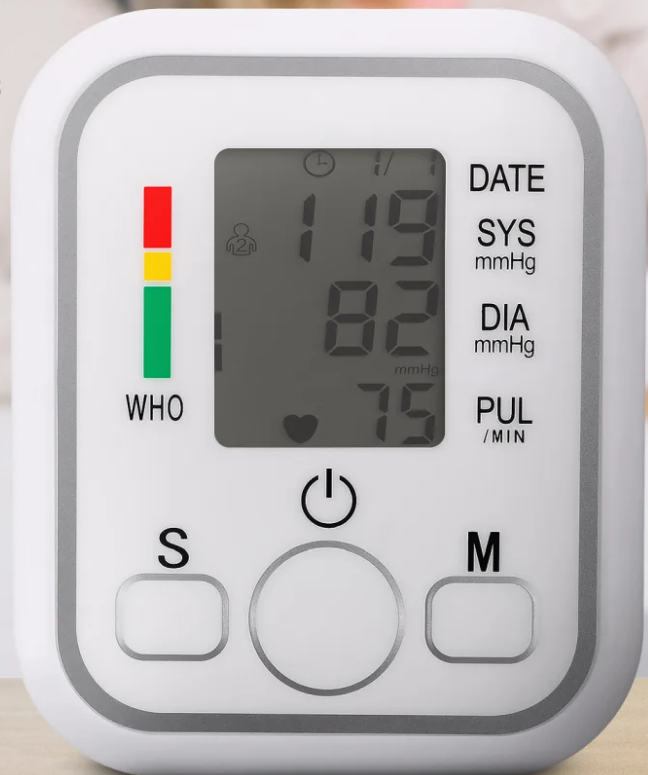

Einfache Ein-Knopf-Bedienung



Dank der intuitiven Ein-Knopf-Bedienung ist das Gerät auch für Personen, die mit der Medizintechnik nicht vertraut sind, leicht zu bedienen.



Eine Energiesparfunktion, die das Gerät nach drei Minuten Inaktivität automatisch ausschaltet, fördert die langfristige Nutzung des Geräts.



1 Stunde vor der Messung

