



Extralink Smart Life K-69 Kol Damar Tansiyon Aleti, Siyah



5 906168 632099 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kan-basinci-monitorleri/extralink-smart-life-k-69-kol-damar-tansiyon-aleti-siyah>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMIPRMMKQ

Full product description

Sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve nabızın eş zamanlı ölçümü

Cihaz, üç temel sağlık parametresinin eşzamanlı ve doğru ölçümünü sağlar:

The device can simultaneously and accurately measure three key health parameters:



Systolic blood pressure



Diastolic blood pressure



Pulse



Ölçüm hafızası

Cihaz, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve nabız ölçümlerinin son 240 sonucunu kaydetmek ve saklamak için bir hafıza ile donatılmıştır. Zaman içinde sağlık parametrelerindeki değişiklikleri doğru bir şekilde takip etme yeteneği, tedavinin ilerlemesini izlemek veya düzenli sağlık kontrolleri için özellikle yararlı olabilir. Bu işlev aynı zamanda sonuçların tıbbi ziyaretler sırasında profesyonel sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla kolayca paylaşılmasını sağlar

The internal memory of the blood pressure monitor can be used to store results. With dual storage, each measurement result can be stored twice – once as the current result and once as the last result before it. This will store the last 240 measurements in the device's memory.




Tek tuşla basit operasyon

Sezgisel tek tuşla çalıştırma, tıbbi teknolojiye aşina olmayan kişiler için bile cihazın kullanımını kolaylaştırır. Üç dakika işlem yapılmaması durumunda gücü otomatik olarak kapatan enerji tasarrufu özelliği, cihazın uzun süreli kullanımını destekler.

How to use:

1. Wrap the cuff around the patient's left arm.
2. Making sure that the fingers fit between the cuff and the arm to ensure a proper fit, but not too tightly.
3. The cuff should be applied evenly and smoothly, with the bottom edge of the cuff approximately 2 fingers above the bend of the elbow.
4. Raise your left arm with the cuff upwards, holding the monitor at the same height as your heart. This position will help ensure a more accurate blood pressure measurement.
5. Once you have adjusted the cuff and the patient's arm, press the Start-Stop button on the blood pressure monitor to start the measurement.
6. After reading the result, turn off the blood pressure monitor and remove the cuff from the patient's arm.

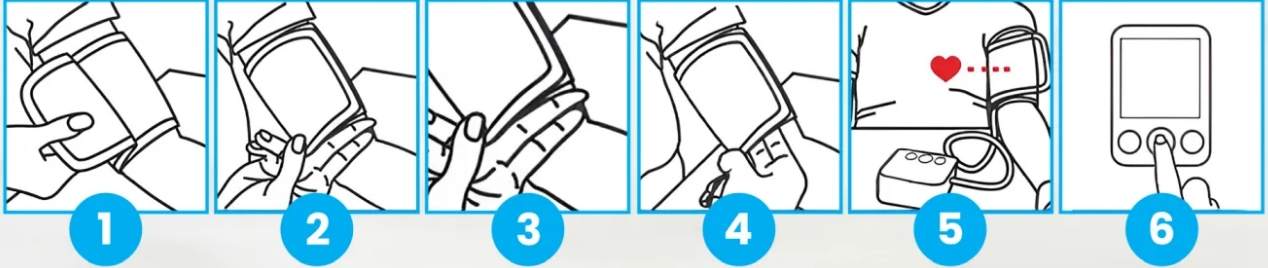

Kompakt tasarım

Kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı, cihazın taşınmasını kolaylaştırarak sağlığını her yerde izlemenize olanak tanır.



Ideal for home use

The compact design and light weight make the device easy to carry, allowing you to monitor your health anywhere



Upper arm blood pressure monitor

Simultaneous measurement of systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse



Accurate measurement



Storage of the last 240 results



LED display



One-button operation



Automatic power switch-off



Simple one-button operation



Intuitive one-button operation makes the device easy to use, even for those unfamiliar with medical technology.



An energy-saving function that automatically switches off the power after three minutes of inactivity, promoting long-term use of the device.



1 hour before measurement

