



Bezdotykový teploměr Extralink Smart Life T003, Bílý



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/detske-teplomery/bezdotykovy-teplomer-extralink-smart-life-t003-bily>

Price: **89,00 zł** gross / 72,36 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGMHJMRMMJH

Full product description

Bezkontaktní měření teploty

Infračervený teploměr umožňuje bezkontaktní měření tělesné nebo povrchové teploty. Funguje tak, že sbírá infračervené záření vyzařované tělesem nebo předmětem a převádí ho na hodnotu teploty.

Multifunctional infrared thermometer



Measures body temperature
from **32°C to 42,5°**



Measures
object temperatures
from **0°C to 100°**

**Its measuring accuracy is $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$,
which ensures reliable results**

Rychlé a efektivní měření

Měření infračerveným teploměrem T003 od Extralinku je okamžité, což z něj dělá rychlý a efektivní způsob získávání informací o teplotě. Je zvláště užitečný pro kojence, malé děti nebo lidi, kteří nedají dopustit na tradiční teploměry.



Measurement in 1 second

The digital thermometer provides an instant measurement time of just 1 second. This allows users to quickly and conveniently check the temperature of the body or objects without unnecessary waiting.



Jednoduchá obsluha teploměru

Stačí namířit přístroj směrem k měření, stisknout tlačítko a výsledek se za chvíli objeví na displeji.



Všestrannost použití

Tyto teploměry lze použít k měření tělesné teploty i různých povrchů, jako jsou tekutiny, potraviny a předměty, což z nich dělá všestranný nástroj v různých situacích.




1 second measurement




LCD display with
backlight




Low battery sensor

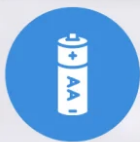

Power supply 2xAA

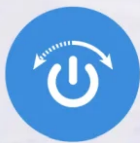

Automatic switch off after
20 seconds

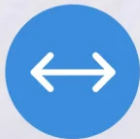


Measuring distance
from 3cm to 5cm

EXTRALINK THERMOMETER



3 display colours

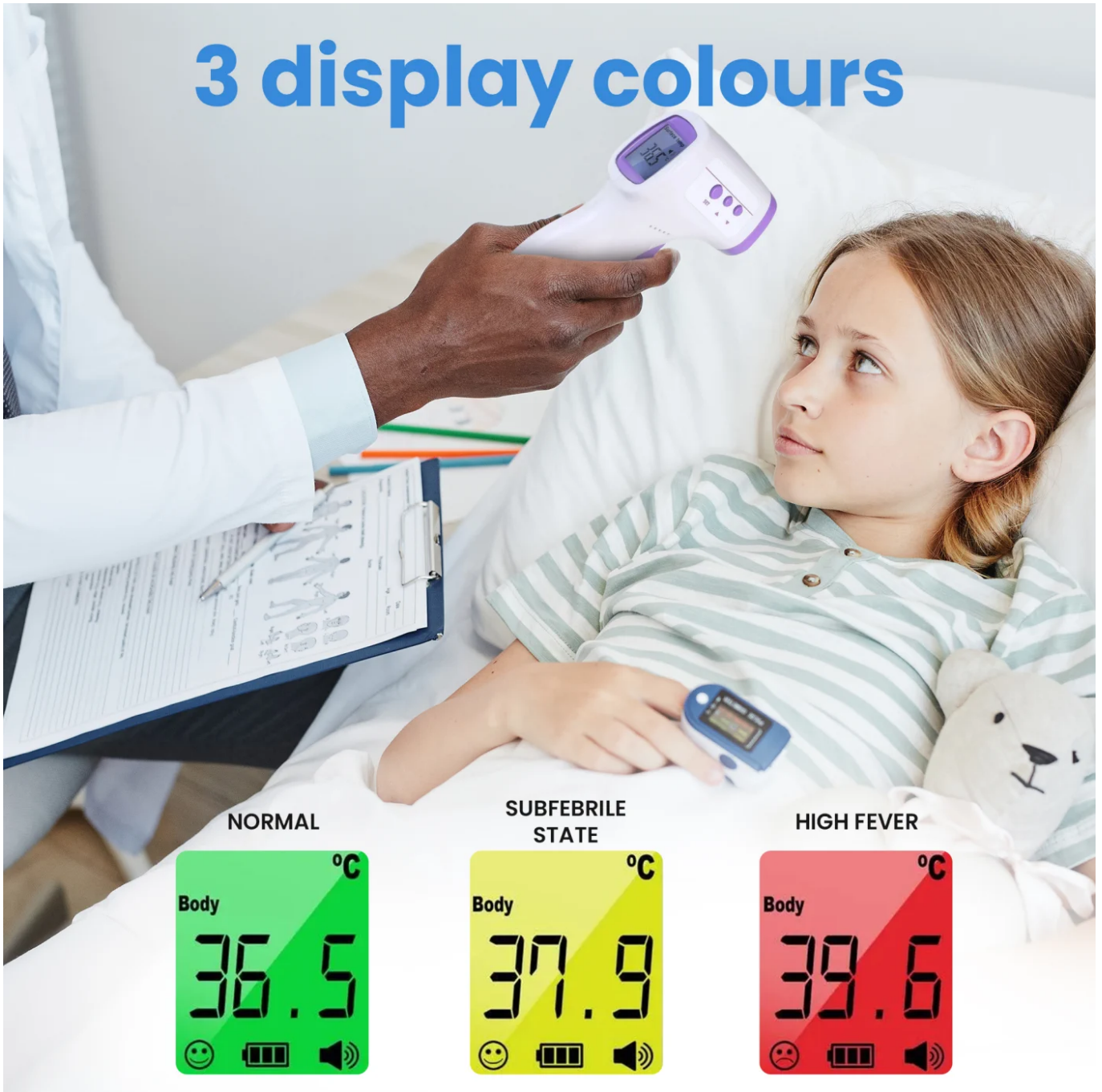

Switching between °C/°F

The thermometer allows users to easily switch between the Celsius and Fahrenheit temperature scales, enabling the device to be used according to the user's preference.

