



EXTRALINK MINI MASSAGE STICK



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/poduszki-masujace/extralink-mini-massage-stick>

Price: **16,46 zł** gross / 13,38 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGMKOGRMJJO

Information:

Extralink Mini Massage Stick — это компактный электростимулятор мышц, использующий технологии TENS и EMS, который помогает облегчать боль, снижать напряжение и поддерживать восстановление после работы, тренировки или длительного сидения. Он предлагает 8 режимов работы и 19 уровней интенсивности, благодаря чему его легко настроить под собственные потребности. Подходит для массажа шеи, спины, талии, бёдер, ног и живота. Имеет понятный экран, простое управление и лёгкую, портативную конструкцию. Ёмкий аккумулятор обеспечивает длительное использование, а быстрая зарядка USB занимает всего 30 минут. Прочные, легко очищаемые гелевые накладки можно использовать многократно.

Full product description


Массажер Extralink Mini

Extralink Mini Massage Stick — это компактный **электростимулятор мышц**, использующий технологии **TENS и EMS** для снятия напряжения и восстановления организма. Устройство помогает уменьшить боль в шее, спине и конечностях, предлагая профессиональный стандарт терапии в домашних условиях. Благодаря небольшим размерам **портативный массажер** подходит для отдыха, офисной работы или после тренировки.



Ключевые преимущества продукта

- **Технология TENS и EMS** — эффективно помогает расслаблять напряженные мышечные структуры и облегчать дискомфорт.
- **Универсальное действие** — конструкция позволяет массировать **шею, талию, бедра, ноги и живот**.
- **Персонализация процедуры** — выбор из **8 режимов работы** и целых **19 уровней интенсивности** стимуляции.
- **Эффективный аккумулятор** — батарея **120mAh** позволяет использовать устройство до **32 дней** на одном заряде.
- **Быстрая подзарядка** — полный цикл зарядки через порт **USB** занимает всего **30 минут**.
- **Удобство и гигиена** — прочные гелевые накладки можно использовать до **60 раз**, и их легко очищать.

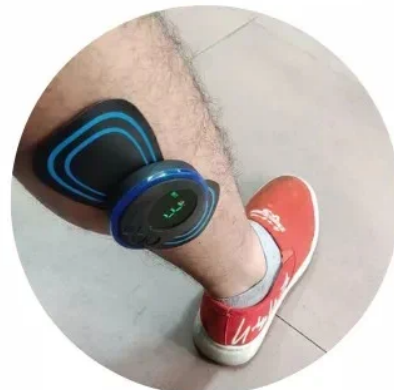

Терапия TENS и EMS

Устройство использует электрические импульсы низкой частоты в диапазоне **1-100Hz**, что способствует прямой стимуляции сенсорных нейронов и мышечных волокон. **Электростимуляция** помогает блокировать болевые сигналы и стимулирует кровообращение, ускоряя процессы восстановления. **Extralink Mini Massage Stick** — удачный выбор для людей, ведущих сидячий образ жизни или испытывающих чрезмерные физические нагрузки, заботясь о комфорте каждый день.



Интуитивное управление

Управление массажером сведено к минимуму, благодаря чему он доступен каждому пользователю. Четкий **цифровой экран** сообщает о текущей выбранной программе, а кнопки управления позволяют плавно изменять параметры. Достаточно прикрепить **электростимулятор** к очищенной коже и выбрать подходящий режим кнопкой "M". Регулировка мощности с помощью плюса и минуса позволяет точно подобрать силу воздействия к порогу чувствительности пользователя.



Мобильность и прочность

Корпус, выполненный из сочетания материалов **ABS, силикона и PU**, гарантирует долговечность при небольшом весе. Компактные размеры **150x70 mm** позволяют брать массажер в ручную кладь или сумку. Устройство обеспечивает свободу движений, поскольку не требует постоянного подключения к сети во время работы. Благодаря напряжению **3,7V** и оптимальной выходной мощности **35mA**, сеанс массажа безопасен и эффективен независимо от того, где вы находитесь.



Эффективный план терапии

Для достижения оптимальных результатов для здоровья рекомендуется использовать устройство по **10 минут в день** в регулярных циклах продолжительностью минимум неделю. Систематичность делает мышцы более эластичными, а хроническое напряжение уходит. **Массажер Extralink** автоматически заботится о безопасности сеанса, работая только после правильного прикрепления накладки к телу. Это решение помогает поддерживать физическую форму без необходимости посещать физиотерапевта.



Экономичность и экологичность

Использование **многоразового аккумулятора** устраняет необходимость постоянно покупать одноразовые батарейки, что приводит к реальной экономии. Одной короткой 30-минутной зарядки через стандартный **порт USB** хватает более чем на месяц ежедневных процедур. Массажные накладки разработаны с расчетом на многократный контакт с кожей — после потери липкости достаточно промыть их водой, чтобы восстановить свойства, что значительно продлевает срок службы всего набора.



Спецификация

Параметр	Подробности
Материал	ABS + силикон + PU
Размеры	150 x 70 mm
Методы массажа	8 режимов и 19 регулируемых уровней
Частота	1-100 Hz
Емкость батареи	120 mAh
Время зарядки	30 минут
Время работы	До 32 дней (при 15 мин в день)
Разъем для зарядки	USB
Рабочее напряжение	3,7 V
Максимальная мощность	35 mA